


Használati útmutató

3 fokozatú szájuhany

L-10

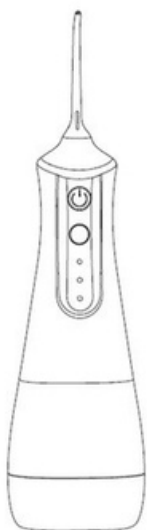

Forgalmazó: Spalazzomed Kft.
spalazzomed@spalazzomed.hu
spalazzomed.hu

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük olvassa el és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• Fontos a használati utasítás megértése és betartása az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Ezért kérjük feltétlenül sajátítsa el a készülék rendeltetésszerű használatát, és őrizze meg az útmutatót. • Kérjük csak fejlesztett rendeltetésszerűen használja a készüléket. (szájhigiéniai célra készült). A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéshez vezet! • A készülék szétszerelése, otthoni javítása tilos, áramütés veszélyét hordozza, és a garancia elvesztésével jár. Amennyiben működési hibát tapasztal, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! • Ne töltsön 40 °C feletti hőmérsékletű folyadékot a tartályba, hogy elkerülje az égési sérüléseket! • Ne merítse vízbe a készüléket, mert az tüzet, áramütést, robbanást okozhat. • Töltés közben véletlen vízbefejtés esetén azonnal húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból, és csak ezután vegye ki a készüléket a vízből! • Ne használjon sérült vezetékét vagy adaptert, cserélje ki a sérült kelleket! • Sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Üzemmod váltástól, és ne töltsen vagy tárolja hőforrás közelében!

EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK


• Ne nyomja a fúvókát a fogakhoz vagy az ínyéhez erősen, hogy elkerülje a sérülést.
• A készüléket biztonságos helyen tárolja, hogy elkerülje a vízbeesést, vagy a leesés következtében okozott mechanikai sérüléseket.
• Ne próbálja meg a töltőkábelt fel- vagy lecsatlakoztatni vizes kézzel.
• A töltéshez a helyi hálózathoz illeszkedő adaptert használjon.
• A töltőkábelt ne alakítsa át, ne rongálja meg, kerülje annak túlzott nyújtását, erős hajlítást, csavarását, továbbá ügyeljen, hogy ne helyezzen rá nehéz tárgyat, és ne szorítsa más tárgyak közé.
• Tisztítás és használat előtt húzza ki a töltőkábelt a készülékből!
• Tárolja nem túl meleg, nem túl párás helyen, ne tegye ki intenzív napfénynek.
• Kerülje a meleg, párás helyeken történő töltést, mint pl. fürdőszoba.
• Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, kérjük húzza ki a töltőkábelt és az adaptert.
• A készülék nem tartalmaz cserélhető vagy javítható alkatrészeket. Üzemzavar esetén kérjük, keresse fel a forgalmazót.
• Ne használja a készüléket fúvóka nélkül!
• Egyes szájvizek korróziót okozhatnak a készülékben, kérjük kerülje a szájvíz használatát!
• A terméket felnőttek számára fejlesztették, gyermekek számára az önálló használata tilos! Mozgásukban vagy mentális képességükben korlátozott személyek és gyermekek csak felelősségteljes felnőtt felügyelete mellett használhatják, miután megfelelő iránymutatást kaptak a felnőttől a készülék biztonságos használatát illetően!
• Ez a készülék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
• Fogínybetegségben szenvedő, valamint 2 hónapon belül szájsebészeti szájzuhany

beavatkozáson

átesett betegek kérdezzék fogorvosukat a használatának javallatáról!

• A kábel eltávolításakor a vezeték helyett a dugót húzza, hogy növelje annak élettartamát.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

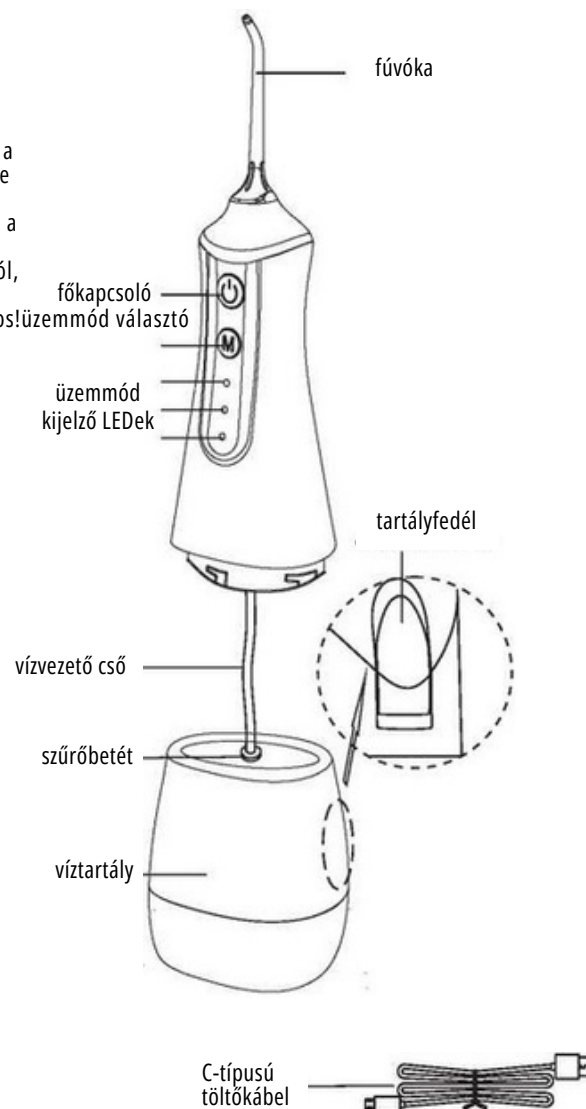

Tartozékok

Standard fúvóka: napi tisztításhoz, 4 db.

Nyelvtisztító: Nyelvre tapadt lepedék eltávolítására, 1 db.

Fogínytasak fúvóka-feltét: speciálisan az íny alatti terület tisztítására, 1 db.

Fogszabályozó fúvóka feltét: fogszabályozók, pótlások tisztítására, 1 db.

Fröccsenésgátló fúvóka feltét: megakadályozza a folyadék fröccsenését, 1 db.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Használat előtt tölts fel a készüléket az alábbiak szerint.
1. Kezei és a készülék, a vezeték legyenek szárazak. Csatlakoztassa az USB csatlakozót egy 5V-os adapterhez (a csomag nem mobiltelefon-töltő

mtaartjadl mazza, legtöbb rendelkezik ilyen adapterrel), csatlakoztassa a hálózathoz.
2. Nyissa ki a töltőfedelet, csatlakoztassa az USB-kábel más másik végét a készülékhez, ellenőrizze annak helyzetét.
Javaslatok:

Amennyiben a jelzőfény használat közben vagy után jelez, az akkumulátor merülőben van, kérjük tölts fel a készüléket.
A teljes töltési idő 3-4 óra, ezalatt a jelzőfény villogása jelzi, hogy a töltés folyamatban van. A töltési idő lejártával, a teljes töltés elérésekor a villogás leáll.

A szájuhany használata:

1. Csatlakoztassa a fúvókát a készülék végén lévő nyíláshoz. A fúvóka cseréjéhez kikapcsolt állapotban

kioldógombot.
2. Töltsön vizet a tartályba az alábbi módszerek közül választva:

a. A tartályfedél kinyitása után vízszintesen a készüléket, és öntsön bele vizet, majd zárja be a fedelet.
b. Forgassa el a tartályt, hogy szét tudja tekerni a tartályt, a készülék testét függőlegesen a tartályt, tölts fel, majd tekerje vissza a testre.







3. Válassza ki a kívánt üzemmódot az M gomb megnyomásával. Az üzemmódot működés közben is átválthathatja az M gomb segítségével.

Az alábbi üzemmódok közül választhat:

Clean: Mélytisztítás, gyors tisztítás.
Pulse: Finoman masszírozza a fogíny,

amely elnyel a vérkeringést, egészségesebbé teheti a fogínyt. Ugyanakkor alkalmas érzékeny fogakhoz is. Ha először használja a készüléket, javasoljuk, hogy ezt a beállítást válassza! Ha Önnek inkább a kíméletesség fontos, nem a mély tisztítás, ezt a beállítást javasoljuk.

Surf: Szaggatott erősebb kifújás, a fogínyek egyesével való masszírozására, pontról-pontra haladva precíz és alapos tisztításra javasoljuk használatát.

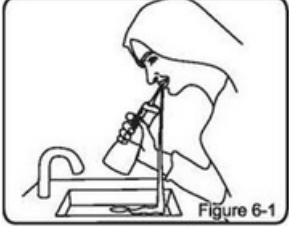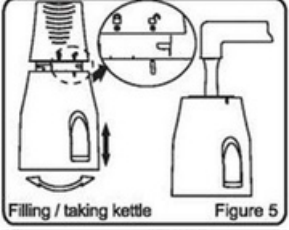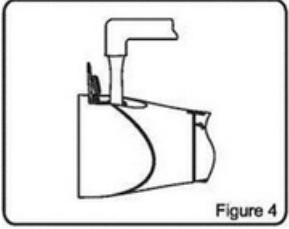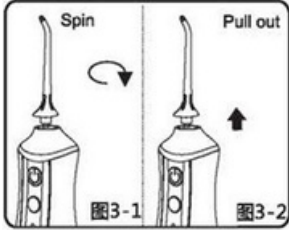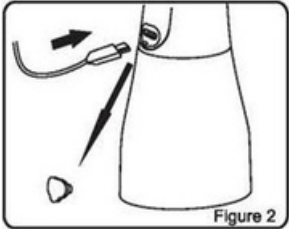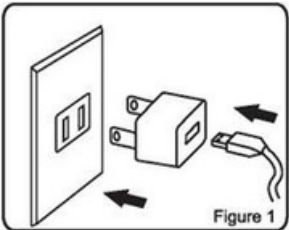

Tipp:
Fogászok javaslatára kezdők számára az első héten a Pulse üzemmód alkalmazása javasolt, majd a továbbiakban, ha megszokta a szájuhany használatát, próbáljon ki más üzemmódokat is. 4. Használat előtt tartsa függőlegesen a szájuhanyt, majd helyezze a fúvókát a szájába, illessze a fogakhoz vagy az ínyhez, és nyissa ki a száját résznyire, hogy a folyadék távozhasson.

5a. Csak ezután nyomja meg bekapcsológombot (így nem fröcsköli össze magát és környezetét). Használat közben az alábbiakra fordítson különös figyelmet:
a. A vízsugár derékszöget kell, hogy bezárjon a fogakkal vagy az ínyvel;
b. Haladjon lassan végig a fogsorán, hogy minden fogat és a fogközöket is megfelelően megtisztítsa;
c. A fúvóka illeszkedjen az íny széléhez, és legyen párhuzamos az ínyvel;

Típek:

Ne irányítsa a vízsugarat közvetlenül a

fogínytasakokba!

Használat után nyomja meg a főkapcsolót a kikapcsoláshoz. A beépített időzítő 2 perc után automatikusan kikapcsolja a készüléket, a megnyomásával újraindíthatja.

Használat utáni teendők:

1. Ürítse ki a víztartályt.
2. A főkapcsolóval ürítse ki a bennmaradt folyadékot.
3. Kapcsolja ki a készüléket, zárja be a tartályfedelelet.
4. Törölje szárazra a szájuhanyt.

Típeink:






A vízmaradék kiürítésével elkerülhető a baktériumok elszaporodása. Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, akkor száradás után tisztítsa meg az alábbiak szerint.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A készüléket tiszta vízzel, vagy semleges tisztítószerrel tisztítsa. Ne használjon maró, dörzsölő hatású anyagokat, mert azok károsíthatják a készüléket. Ne használjon 50 °C-nál melegebb hőmérsékletű vizet a tisztításhoz.

A készülék tisztítása:

- Száraz, vagy nedves kendővel tisztítsa meg a készülék testét.

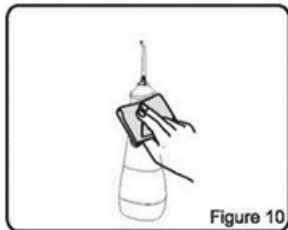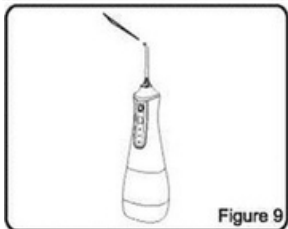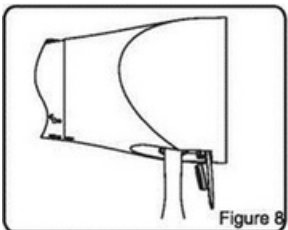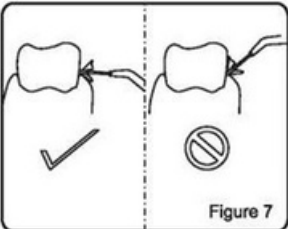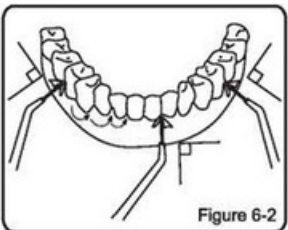

- Ne merítse a készüléket folyadékba tisztítás céljából!
A víztartály tisztítása:

- A tartály száraz vagy nedves kendővel tisztítható, vagy a főegységről leválasztva tiszta vízzel előblíthető.
- Ha sokáig nem használja a készüléket, kérjük, tisztítsa meg a tartály belsejét. A fúvóka tisztítása:
- Száraz vagy nedves ruhával tisztítható, vagy a készülékről leválasztva tiszta vízzel öblíthető, majd szárazra törölhető.
- Ne hajlítsa, húzza, csavarja a fúvókát.
- Fogorvosok javaslatára ajánlott a fúvókát fél évente cserélni.

HIBAELHÁRÍTÁS

hibajelenség

	lehetséges okok	megoldás
A készülék leáll.	Vásárlás után vagy hosszú állás után alacsony akkumulátor-töltöttség előfordulhat. Fúvóka-eltömődés.	Töltse fel 3 óránál hosszabb idő alatt.
Alacsony víznyomás, vagy nincs vízsugár.	A szűrő eltömődött.	Cserélje le a fúvókát. Tisztítsa ki a szűrőt.
Üresen működött.	Üresen működött.	Töltse fel a tartályt, majd vízszintesen tartva kapcsolja be a készüléket. Keresse fel a forgalmazót.
Feltöltött akkumulátorral is csak rövid ideig használható.	Az akkumulátor elöregedett. Élételen töltési idő.	Töltse több, mint 3 órán keresztül. Igazítsa meg/cserélje ki a
A töltés-kijelző nem működik.	Nincs áram alatt a készülék. Töltési áramkör hiba.	Ellőző adsea pftel ra éfos/rvga

ÁRTALMATLANÍTÁS

A készülékben található újratölthető akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül. A már nem használt, hibás készüléket ne dobja kommunális hulladékba, hanem a helyi szabályozások és lehetőségek felmérése után a megfelelő módon ártalmatlanítsa (szeméttelpek speciális részlege, lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtők).

GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük. Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát. A következő esetek garanciavesztéshez vezetnek: Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések stb. Normál használat okozta öregedés és elhasználódás. Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.

Elállás a termék kibontását követően higiéniai okokból nem lehetséges!